


## OPTICHAMBER DIAMOND s inhalační maskou LiteTouch



Inhalační nástavec s antistatickou komorou konstruován k maximálnímu využití léčiva při aplikaci pomocí pMDI v plicích.



**Inhalace přímo z dávkovacího inhalátoru**  
Léčivo může ulpívat v ústech, krku, žaludku a zapříčinit výskyt vedlejších účinků.

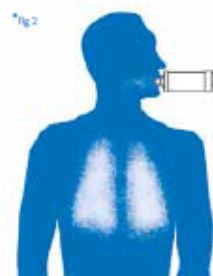

**Inhalace pomocí inhalačního nástavce**  
Většina léčiva se dostává až do plic, kde léčí.

### Výhody

- Antistatická komora drží aerosol déle a dává tak pacientům dostatek času k důkladné inhalaci léčiva.
- Nízkoodporové membrány usnadní pacientům dýchání přes komoru nástavce.
- Šetrným tlakem masky k obličeji se utěsní její okraj s měkce přilnavou úpravou a zajistí se tak optimální dávkování.
- Výdechový ventil nahoře umožňuje dospělým kontrolu správné inhalace u dětí.

## Inhalační nástavec Optichamber Diamond

- ◆ Název: Optichamber , inhalační nástavec (s maskou), velikost: .....
- ◆ Cena včetně masky: 500,- Kč
- ◆ Velikosti masek: S (děti do 18 měs.) M (děti do 6 let) L (pro dospělé)

Masku lze zakoupit i samostatně – požádejte, ať Vám ji pracovník lékárny či zdravotnických potřeb objedná od distributora Liftec CZ (zelená linka Po – Pá od 8 – 12 hod: 800 500 500).

## Inhalační nástavec pomůže dostat inhalační léčivo až do plic – tam působí a léčí.

Postupujte pečlivě dle návodu k použití, přečtěte si také podrobnější návod, který je součástí balení inhalačního nástavce Optichamber Diamond.



1. Odstraňte uzávěry – dávkovací inhalátor a inhalačního nástavce Diamond. Ujistěte se, že Optichamber je čistý, odstraňte případný prach a nečistotu



2. Zasuňte těsně dávkovací inhalátor do zadní části nástavce.



3. Je-li nutné použití masky, připevněte ji na náustek inhalačního nástavce, jemně maskou pootočte, až bude dobře těsnit.



4. Nástavec s inhalátorem 4-5krát protřepejte.



5. Obemkněte rty těsně náustek nástavce, aby nedocházelo k úniku. Vydechněte. Vstříkněte 1x (tj. 1 dávku léčiva) do komory a ihned začněte pomalu, zhluboka nadechovat.\*



6. Ozve-li se zvukový signál, nadechněte pomaleji. Zadržte dech po dobu 8 vteřin a vydechněte.



7. Používáte-li masku, přitiskněte si ji pevně přes nos a ústa k obličejí. Vstříkněte 1x léčivo do komory nástavce a proveďte 6x nádech a výdech.\*



8. Výdechový ventil se otevře při výdechu pacienta. To vám pomáhá sledovat pacientovo dýchání.

\* Doporučí-li vám lékař více než jednu dávku (vstříknutí) léčiva, vyčkejte jednu minutu a pak opakujte kroky 5 – 8.

**Údržba:** nástavec rozebrat, vymýt teplou vodou s jemným tekutým neabrazivním saponátem (na nádobí), opláchnout. Nechat vyschnout.

### Dovozce do ČR:

Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324

198 00 Praha 9 – Kyje

Informace a objednávky: ☎ 272 100 474

[www.linde-gas.com](http://www.linde-gas.com)